



Vital Signs Monitor 300 Series | Automatiseret Vital Signs Monitor

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serien

Avanceret monitorering til en overkommelig pris



WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serien

Enkel. Flexibel. Overkommelig pris.

En alt-i-en serie, til spotcheck og kontinuerlig monitorering af vitale parametre.

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serien – er en monitor til monitorering af vitale parametre, til en overkommelig pris, og som er både fleksibel og nem at bruge.

Den enkle betjening af menuen med trykknapper og det letlæselige display gør den nem at lære og let at få de vigtige oplysninger, du har brug for, således at du bruger mere tid sammen med patienten og mindre tid sammen med udstyret.

Udover de vigtige funktioner, som du er vant til fra Welch Allyn, indeholder Vital Signs Monitor 300 serien disse funktioner:

- Opdelte patientmodes med individuelle indstillinger, der understøtter voksne, børn og nyfødte
- Hurtige, nøjagtige temperaturlæsninger med Welch Allyn SureTemp® Plus temperaturmåling
- Enkel, ligefrem betjening og en intuitiv navigering gennem menuen med vores nyskabende design af monitoren

Da 300 seriens monitor er ideel for både rutinemæssig bedømmelse og kontinuerlig monitorering af vitale parametre, er det som at få to enheder, for én lav pris.



Procedurer

Vital Signs Monitor 300 serien er den ideelle løsning til at tage patientens rutinemæssige vitale parametre eller til monitorering før, under og efter procedurer, mindre kirurgiske indgreb og behandlinger, med forskellige indstillingsmuligheder, deriblandt:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Medicinske/kirurgiske områder | <input type="checkbox"/> Ambulatorier |
| <input type="checkbox"/> Pædiatriske afdelinger | <input type="checkbox"/> Speciallægers klinikker |
| <input type="checkbox"/> Akutafdelinger | <input type="checkbox"/> Skadestuer |
| <input type="checkbox"/> Hospitalsafdelinger med særlige procedurer | <input type="checkbox"/> Dialyseafdelinger |
| <input type="checkbox"/> Fødeafdelinger | <input type="checkbox"/> Tandkirurgiske behandlingssteder |
| <input type="checkbox"/> Kirurgiske ambulatorier | |

Omfattende funktioner

Non-invasivt blodtryk

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serien starter som en non-invasiv blodtryks (NIBP)-monitor. Selv i den mest basale konfiguration medfølger de funktioner, du har brug for:

- Modes for flere patienter – funktionsmodes for voksne, børn og nyfødte
- Mode for automatisk blodtryk – vælg mellem 13 forskellige måleintervaller
- Programmerbare alarmer – for højt/lavt systolisk, diastolisk og pulsslag
- LCD-display – ur-vindue og navigering af menu
- LED-display – letlæselig, klar visning af aflæsningerne af de vitale parametre
- Indbygget hukommelse – gemmer op til 99 sæt af målte data

SureTemp® Plus temperaturmåling

Tilføj SureTemp Plus elektronisk temperaturmåling, og drag fordel af den revolutionerende målingskapacitet, udviklet af Welch Allyn. Opnå orale, rektale og axillære temperaturer, så hurtigt som du ønsker, og med den nødvendige nøjagtighed.

- Oralt – ca. 4-6 sekunder
- Axillært – voksne, ca. 15 sekunder; børn, ca. 10 sekunder
- Rektalt – ca. 10 sekunder



Pulsoximetri

Vital Signs Monitor 300 serien kan konfigureres med pulsoximetri (SpO₂)-teknologi med bevægelses-tolerance fra Masimo® eller OxiMax® -teknologi fra Nellcor.


- Programmerbare alarmer – høje/lave mætningsniveauer
- Et bredt spektrum af patientsensorer
- Pulstonefunktion (ekstraudstyr) – hørbar hjertefrekvens og SpO₂ mætningsindikator

Printer (ekstraudstyr)

Tilføj en integreret termisk printer for trendanalyse eller opbevaring af optegnelser, og du har hvad du behøver – med et tryk på én knap.

Enkelt og ligetil

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serien er nem at betjene. Enkel programmering ved hjælp af trykknapper og et stort, digitalt display gør indlæring og brug af monitoren nem og problemfri.

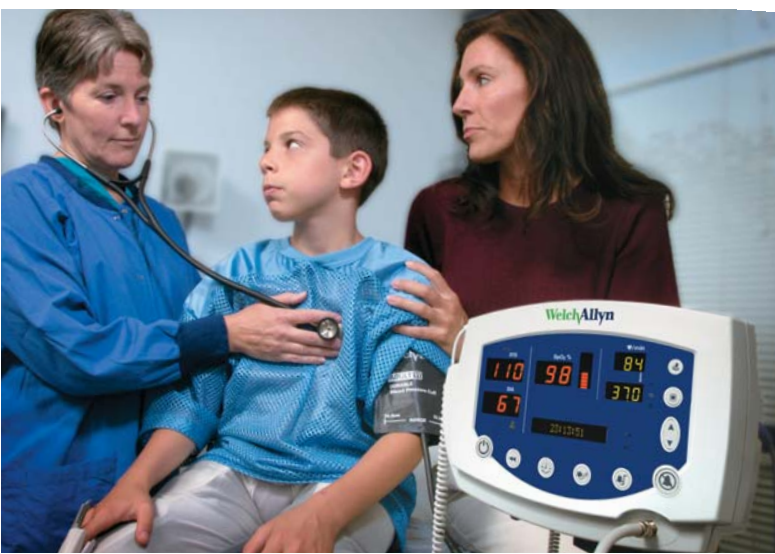

Tag den med – hvor som helst

Bær den, sæt den på et bord, kør den af sted på det mobile stativ eller monter den på en væg. Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 serien kan følge patienten hvor som helst – ganske nemt.

Bestillingsoplysninger

53000-E2	Kun NIBP (inkluderer pulsslag og MAP)
5300P-E2	NIBP/printer
530T0-E2	NIBP/temperatur
530TP-E2	NIBP/temperatur/printer
53S00-E2	NIBP/Masimo pulsoximetri
53S0P-E2	NIBP/Masimo pulsoximetri/printer
53ST0-E2	NIBP/Masimo pulsoximetri/temperatur
53STP-E2	NIBP/Masimo pulsoximetri/temperatur/printer
53N00-E2	NIBP/Nellcor pulsoximetri
53N0P-E2	NIBP/Nellcor pulsoximetri/printer
53NT0-E2	NIBP/Nellcor pulsoximetri/temperatur
53NTP-E2	NIBP/Nellcor pulsoximetri/temperatur/printer
008-0835-01	Mobil stander med kurv til tilbehør
008-0834-01	Vægmontering med kurv til tilbehør
008-0890-00	Montering på dropstativ



Welch Allyn European Customer Services

Navan Business Park, Dublin Road, Co. Meath, Republic of Ireland

Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754

www.welchallyn.com

Kivex

Usserød Kongevej 157 DK-2970 Hørsholm

Tel: +45 4517 0600 Fax: +45 4557 0188

e-mail: kivex@kivex.dk

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

©2005 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. SureTemp er et registreret varemærke, der tilhører Welch Allyn, Inc. Nellcor og OxiMax er registrerede varemærker, der tilhører Nellcor Puritan Bennett Inc. Masimo er et varemærke, der tilhører Masimo Corporation.