



Vital Signs Monitor 300 Series | Sistema di monitoraggio automatico dei parametri vitali

Vital Signs Monitor 300 Series di Welch Allyn

Avanzata tecnologia di monitoraggio alla portata di tutti



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Vital Signs Monitor 300 Series di Welch Allyn

Semplice. Flessibile. Conveniente.

Controlli a spot e monitoraggio continuo dei parametri vitali,
il tutto in un unico sistema.

Nell'esercizio quotidiano della propria professione, il clinico è posto continuamente sotto pressione per migliorare i risultati, incrementare l'efficienza operativa e ridurre i costi. Una sfida importante, che può essere in parte facilitata grazie al Vital Signs Monitor 300 Series di Welch Allyn – un sistema di monitoraggio delle funzioni vitali, economicamente accessibile, e nel contempo flessibile e facile da usare.

Come il predecessore Vital Signs Monitor di Welch Allyn, la Serie 300 contribuisce a incrementare la produttività fornendo il monitoraggio automatico dei parametri vitali prima, durante e dopo gli interventi. Il semplice funzionamento su menu a pulsanti e il display luminoso assicurano un rapido apprendimento e un'immediata acquisizione di informazioni importanti, consentendo al clinico di dedicare più tempo ai pazienti e meno tempo nella gestione delle apparecchiature.

In aggiunta alle caratteristiche di eccellenza da sempre offerte da Welch Allyn, il Vital Signs Monitor 300 Series prevede le seguenti funzioni innovative:

- Modalità separate per pazienti con impostazioni specifiche per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- Misurazioni rapide ed accurate della temperatura con il sistema di termometria leader dell'industria SureTemp® Plus di Welch Allyn
- Funzionamento semplice, diretto e navigazione su menu intuitivi grazie al design innovativo del monitor

Inoltre, essendo il monitor '300 Series' ideale sia per la valutazione di routine che per il monitoraggio continuo delle funzioni vitali, è come avere due apparecchi al prezzo di uno.



Interventi

Il 'Vital Signs Monitor 300 Series' rappresenta la soluzione ideale per la valutazione di routine delle funzioni vitali del paziente o per il monitoraggio prima, durante e dopo interventi e chirurgia minore in una varietà di ambienti, tra i quali:

- Reparti di medicina/chirurgia
- Centri di chirurgia ambulatoriale
- Reparti di pediatria
- Cliniche ambulatoriali
- Reparti di pronto soccorso e medicina d'urgenza
- Studi medici specialistici
- Dipartimenti ospedalieri per procedure speciali
- Centri di assistenza d'urgenza
- Reparti di ostetricia
- Centri di dialisi
- Ambulatori dentistici

Funzioni complete

Rilevazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP)

Il Vital Signs Monitor 300 Series di Welch Allyn nasce innanzi tutto come sistema di monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa (NIBP). Anche nella sua configurazione di base, è dotato delle funzioni e caratteristiche necessarie.

- Molteplici modalità paziente – modalità operative per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- Modalità automatica per la pressione arteriosa – scelta di 13 intervalli di misurazione
- Allarmi programmabili – per valori alti/bassi di pressione sistolica, diastolica e frequenza del polso
- Display LCD – orologio e navigazione su menu
- Display con LED – Visualizzazione chiara e luminosa dei valori delle funzioni vitali
- Memoria interna – salva fino a 99 insiemi di dati di misurazione

Termometria SureTemp® Plus

L'aggiunta della funzione di termometria elettronica SureTemp Plus consente di trarre vantaggio dalle rivoluzionarie potenzialità di misurazione sviluppate da Welch Allyn, misurando la temperatura orale, rettale e ascellare con la rapidità desiderata e l'accuratezza richiesta.

- Orale – circa 4 secondi
- Ascellare – Adulti, circa 15 secondi; pediatrico, circa 10 secondi
- Rettale – circa 10 secondi



Pulsiossimetria

Il Vital Signs Monitor 300 Series può essere configurato con la tecnologia SpO₂ tollerante al movimento di Masimo® o la tecnologia *OxiMax*® di Nellcor.


- Allarmi programmabili – livelli alti/bassi di saturazione
- Ampia varietà di sensori
- Opzione tono del polso – frequenza cardiaca udibile e indicatore di saturazione SpO₂

Opzione Stampante

L'aggiunta della funzione di stampante termica integrata consente l'analisi o la registrazione dei trend da analizzare, con la praticità di ottenere la funzione richiesta con la semplice pressione di un pulsante.

Semplice e diretto

Il Vital Signs Monitor 300 Series di Welch Allyn presenta una brevissima curva di apprendimento. La programmazione mediante la semplice pressione di un pulsante e l'ampio display digitale consentono un facile apprendimento delle funzioni del monitor il cui utilizzo risulta così estremamente semplice.

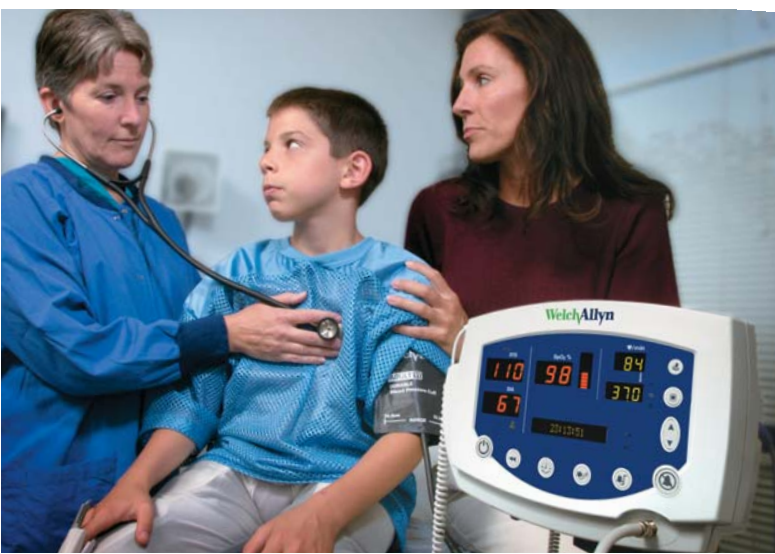

Trasportabile e collocabile ovunque

Il monitor può essere trasportato a mano, riposto su un ripiano, spostato sull'apposito supporto mobile su ruote, o montato a parete. E' possibile usufruire facilmente di tutte queste possibilità grazie alla flessibilità delle posizioni di montaggio facilmente intercambiabili.

Il Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Series segue così il paziente ovunque si trovi, senza alcuna difficoltà.

Informazioni per gli ordini:

53000-I2	solo NIBP (comprensivo di frequenza del polso e MAP)
5300P-I2	NIBP/Stampante
530T0-I2	NIBP/Temperatura
530TP-I2	NIBP/Temperatura/Stampante
53S00-I2	NIBP/SpO ₂ Masimo
53S0P-I2	NIBP/SpO ₂ Masimo /Stampante
53ST0-I2	NIBP/SpO ₂ Masimo /Temperatura
53STP-I2	NIBP/SpO ₂ Masimo /Temperatura/Stampante
53N00-I2	NIBP/SpO ₂
53N0P-I2	NIBP/ SpO ₂ / Stampante
53NT0-I2	NIBP/ SpO ₂ /Temperatura
53NTP-I2	NIBP/ SpO ₂ /Temperatura/ Stampante
008-0835-01	Supporto mobile con cestello porta-accessori
008-0834-01	Montaggio a parete con cestello porta-accessori
008-0890-00	Attacco su asta flebo



Distributore per l'Italia

CORIOS
NETWORK

Corios s.c.

via Della Pace, 14, 20098 S. Giuliano, Milanese (MI)
Tel: 02 98240506 Fax: 02 98491761

©2005 Welch Allyn. Tutti i diritti riservati. SureTemp è un marchio registrato di Welch Allyn, Inc. Nellcor e OxiMax sono marchi registrati di Nellcor Puritan Bennett Inc. Masimo è un marchio di Masimo Corporation.

SM2615IT RevD

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
dall'Italia Tel: +39 02 69 682 425
Fax: +39 02 69 633 697
www.welchallyn.com