



Vital Signs Monitor 300 Series | Automatisk Vital Signs Monitor

## Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 series

Avansert overvåkning til fordelaktig pris



**WelchAllyn**<sup>®</sup>

Advancing Frontline Care<sup>™</sup>

## Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Series.

# Enkel. Fleksibel. Prisgunstig.

## Pasientmonitor for enkeltmålinger og kontinuerlig overvåkning.

Som lege blir du hver dag presset til å forbedre resultatene, øke effektiviteten og senke kostnadene. Utfordringene er formidable, men kan bli lettere å takle med den Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Series – en prisgunstig pasientmonitor som er både fleksibel og enkel i bruk.

På samme måte som den originale Welch Allyn Vital Signs Monitor, bidrar 300 Series-monitoren til en mer effektiv bruk av din egen tid ved at du kan foreta automatiske pasientmålinger før, under og etter prosedyrer. Den enkle, trykknappstyrte betjeningen og det lettleste displayet gjør at du raskt blir kjent med og enkelt kan hente ut den informasjonen du trenger. Dermed kan du bruke mer tid på pasientene og mindre tid på utstyret.

I tillegg til de nyttige funksjonene du forventer av et apparat fra Welch Allyn, inneholder Vital Signs Monitor 300 Series flere spennende nye funksjoner:

- Egne pasientmodus med individuelle innstillinger for voksne, pediatriske og neonatale pasienter
- Raske, nøyaktige temperaturmålinger med bransjeledende Welch Allyn SureTemp® Plus temperaturmåler
- Enkel og liketil betjening og intuitiv menystyring med helt ny monitorkonstruksjon

Fordi 300 Series-monitoren er ideell både til rutinemessige vurderinger og kontinuerlig overvåking av tallverdier, er det som om man får to enheter til prisen av én.



### Prosedyrer

Vital Signs Monitor 300 Series er en ideell løsning for rutinemessig kontroll av pasientens tallverdier og overvåkning av pasienten under og etter prosedyrer, mindre kirurgiske inngrep og behandlinger i en rekke ulike situasjoner, blant annet på:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Medisinske/kirurgiske avdelinger           | <input type="checkbox"/> Polikliniske kirurgisentre |
| <input type="checkbox"/> Barneavdelinger                            | <input type="checkbox"/> Polikliniske avdelinger    |
| <input type="checkbox"/> Akuttavdelinger                            | <input type="checkbox"/> Spesiallegekontorer        |
| <input type="checkbox"/> Sykehusavdelinger med spesielle prosedyrer | <input type="checkbox"/> Akuttmottak                |
| <input type="checkbox"/> Fødeavdelinger                             | <input type="checkbox"/> Dialyseavdelinger          |
|   | <input type="checkbox"/> Tannlegekontorer           |

## Omfattende funksjoner

### Ikke-invasivt blodtrykk

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Series er i utgangspunktet et blodtrykksapparat for måling av ikke-invasivt blodtrykk (NBP). Selv i den mest grunnleggende konfigurasjonen har den de funksjonene som du trenger.

- Modus for flere pasienttyper – voksen, barn og neonatal funksjonsmodus
- Modus for automatisk blodtrykkmåling – velg mellom 13 måleintervaller
- Programmerbare alarmer – for høyt/lavt systolisk og diastolisk trykk samt pulsfrekvens
- LCD-display – viser klokke og meny navigering
- LED-display – tydelig og klar visning av tallverdier
- Internt minne – kan lagre opptil 99 sett med måldata

### SureTemp® Plus-temperaturmåler

Basiskonfigurasjonen kan utvides med SureTemp Plus elektronisk temperaturmåler som benytter Welch Allyns revolusjonerende måleteknologi. Temperaturen kan måles oralt, rektalt og aksillært med den hastigheten du ønsker og den nøyaktigheten du forventer.

- Oralt – ca. 4 sekunder
- Aksillært – voksne: ca 15 sekunder, barn: ca. 10 sekunder
- Rektalt – ca. 10 sekunder



### Pulsoksymetri

Vital Signs Monitor 300 Series kan konfigureres med bevegelsestolerant pulsoksymetri (SpO<sub>2</sub>)-teknologi fra Masimo® eller *OxiMax*®-teknologi fra Nellcor.


- Programmerbare alarmer – høye/lave metningsnivåer
- Et bredt spekter av pasientprober
- Pulslyd (tilleggsvalg) – lydssignal for hjertefrekvens og SpO<sub>2</sub>-metning

### Skriver (tilleggsvalg)

Det er mulig å koble til en intern termoskriver for trendanalyse eller datalagring, og du kan skrive ut dataene du trenger med ett enkelt knappetrykk.

## Enkel og intuitiv

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Series har en svært kort lærecurve. Ukomplisert programmering med trykknapper og et stort, digitalt display gjør det enkelt å bli kjent med bruken av monitoren.

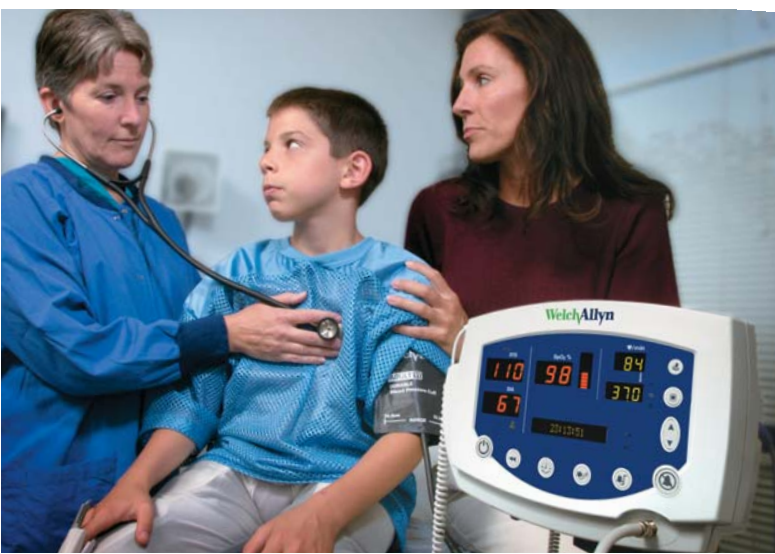

## Ta den med deg der du trenger den

Ta den under armen, plasser den på et bord, trill den på det tilhørende mobile stativet eller heng den opp på vegg.

Du kan gjøre alt dette – og det er en enkel sak å bytte fra én fleksibel monteringsposisjon til en annen.

Welch Allyn Vital Signs Monitor 300 Series kan pasienten ta med seg over alt – uten problemer.

### Bestillingsinformasjon:

53000	Kun NIBP (inkluderer pulsfrekvens og MAP)
5300P	NIBP/skriver
530T0	NIBP/temperatur
530TP	NIBP/temperatur/skriver
53S00	NIBP/Masimo pulsoksymetri
53S0P	NIBP/Masimo pulsoksymetri/skriver
53ST0	NIBP/Masimo pulsoksymetri/temperatur
53STP	NIBP/Masimo pulsoksymetri/temperatur/skriver
53N00	NIBP/Nellcor pulsoksymetri
53N0P	NIBP/Nellcor pulsoksymetri/skriver
53NT0	NIBP/Nellcor pulsoksymetri/temperatur
53NTP	NIBP/Nellcor pulsoksymetri/temperatur/skriver
008-0835-01	Trillestativ med tilbehørskurv
008-0834-01	Veggoppheng med tilbehørskurv
008-0890-00	IV Pole Mount



### Welch Allyn European Customer Services

Navan Business Park, Dublin Road, Co. Meath, Republic of Ireland

Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754

[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

**WelchAllyn**<sup>®</sup>

Advancing Frontline Care™

© 2005 Welch Allyn. Med enerett. SureTemp er et registrert varemerke for Welch Allyn, Inc. Nellcor og OxiMax er registrerte varemerker for Nellcor Puritan Bennett Inc. Masimo er et varemerke for Masimo Corporation.

SM2615N0 RevD