



Vital Signs Monitor 300 Series | Monitor automático dos sinais vitais

Welch Allyn Vital Signs Monitor Serie 300

Monitorização avançada agora mais económica



WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]

Welch Allyn Vital Signs Monitor Serie 300.

Simple. Flexível. Económico.

O seu monitor para controlo isolado ou contínuo dos seus sinais vitais, numa única unidade.

Na sua função de médico hospitalar, vê-se constantemente obrigado, dia a dia, a melhorar os resultados, a aumentar as eficiências operatórias e a reduzir os custos. É um desafio um pouco desencorajante, mas um desafio que pode ser um pouco facilitado graças ao monitor Welch Allyn Vital Signs Monitor Serie 300 — um monitor dos sinais vitais económico e também flexível e fácil de utilizar.

Tal como o monitor original de sinais vitais Welch Allyn Vital Signs Monitor, o instrumento Serie 300 ajuda a aumentar a sua produtividade pois nos permite verificar os sinais vitais antes, durante e depois dos procedimentos. A operação simples, efectuada por meio de um menu e de um botão de pressão, bem como o mostrador bem iluminado, permitem-lhe descobrir rapidamente e recuperar facilmente as informações importantes de que necessite, e permite-lhe assim passar mais tempo com o seu doente e menos com o seu equipamento.

Para além das funções excelentes que já são de esperar da Welch Allyn, o aparelho Vital Signs Monitor Serie 300 oferece-lhe várias funções novas e excelentes, a saber:

- Modos diferentes para doentes diferentes, com definições individuais para adultos, crianças e recém-nascidos
- Leituras rápidas e exactas da temperatura, com a termometria Welch Allyn SureTemp® Plus, a melhor da indústria
- Uma operação simples e directa e uma navegação intuitiva, por meio de um menu, e um monitor cujo design é inovador

E como o monitor Serie 300 é ideal tanto para avaliações habituais como para a monitorização contínua dos sinais vitais, é como se tivesse adquirido dois dispositivos a um único preço económico.



Procedimentos

O aparelho Vital Signs Monitor Serie 300 constitui a solução ideal para registo habitual dos sinais vitais dos seus doentes ou para sua monitorização antes, durante e depois das pequenas intervenções cirúrgicas e de vários tipos de tratamentos, incluindo:

- Nas enfermarias ou salas de operações
- Nas enfermarias pediátricas
- Departamentos de urgências
- Departamentos de intervenções especiais dos hospitais
- Nas salas de parto
- Departamentos de cirurgia a doentes não internados
- Nas clínicas de doentes externos
- Consultórios de cirurgiões especializados
- Centros de cuidados de urgência
- Nas unidades neo-natais
- Consultórios de dentistas

Nas unidades de diálise

Funções integradas

Medição não invasiva da tensão arterial. O monitor de sinais vitais Welch Allyn Vital Signs Monitor Serie 300 começa por ser um monitor não invasivo da tensão arterial (NIBP). Mesmo na sua configuração mais básica, o dispositivo oferece-lhe as funções que lhe são necessárias.

- Modos para doentes múltiplos – modos de operação para Adulto, Pediátrico e Neo-natal
- Modo automático de medição da tensão arterial – faça a sua selecção a partir de 13 intervalos de medição
- Alarmes programáveis – para níveis altos ou baixos de tensão sistólica ou diastólica ou de pulsação
- Mostrador de LCD – janela de mostrador e navegação por menu
- Mostrador de LED – visualização clara e brilhante das leituras de sinais vitais
- Memória incluída – guarde um máximo de 99 grupos de dados de medição

Termometria SureTemp® Plus

Adicione a termometria SureTemp Plus Electronic Thermometry e tire vantagem da capacidade de medição revolucionária desenvolvida pela Welch Allyn. Verifique a temperatura oral, rectal e axilar com a velocidade de que necessita e a precisão que requer.

- Oral – cerca de 4 segundos
- Axilar – Adultos, cerca de 15 segundos; doentes pediátricos, cerca de 10 segundos
- Rectal – cerca de 10 segundos



Oximetria de pulso

O dispositivo Vital Signs Monitor Serie 300 pode ser configurado com a tecnologia de oximetria de pulso (SpO₂) com tolerância de movimentos Masimo® ou *OxiMax*® da Nellcor.


- Alarmes programáveis – níveis de saturação altos ou baixos
- Uma grande variedade de sensores para o doente
- Função facultativa de tom de pulso – ritmo cardíaco audível e indicador de saturação de SpO₂

Impressora facultativa

Acrescente uma impressora térmica integrada para realizar análise de tendências ou para guardar seus registos, e consiga o que necessita com o premir de um botão.

Simple e directo

O monitor Welch Allyn Vital Signs é fácil de utilizar e de entender. A programação simples, por meio de botões de pressão, bem como o mostrador grande e digital, facilitam e simplificam muito a tarefa de aprender a utilizar o monitor.

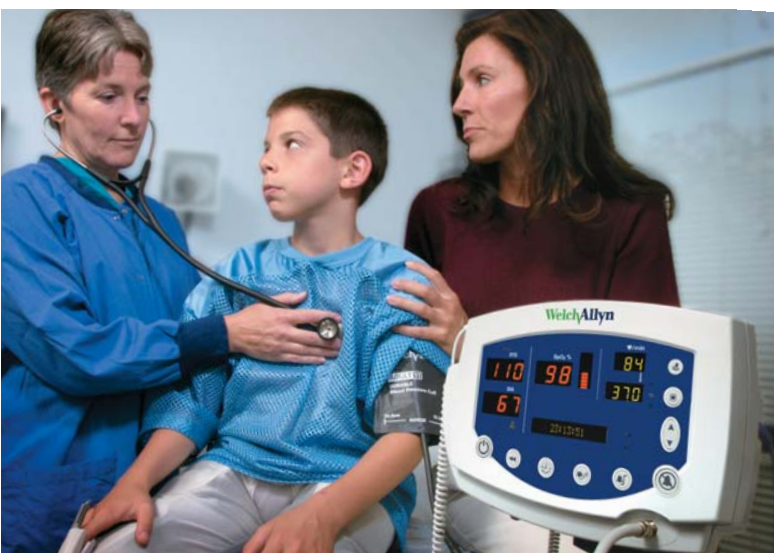

Leve-o para onde for preciso

Transporte-o, coloque-o sobre uma banca, transporte-o no seu próprio suporte móvel com rodas ou monte-o numa parede. Faça tudo isso – é fácil mudá-lo de uma posição de montagem flexível para outra.

O aparelho Welch Allyn Vital Signs Monitor Serie 300 para a medição dos sinais vitais vai para onde o seu doente for, sem esforço algum.

Para encomendar:

53000-U2	NIBP apenas (inclui a taxa de pulso e MAP)
5300P-U2	NIBP/Impressora
530T0-U2	NIBP/Temperatura
530TP-U2	NIBP/Temperatura/Impressora
53S00-U2	NIBP/Masimo Oximetria de pulso
53S0P-U2	NIBP/Masimo Oximetria de pulso/Impressora
53ST0-U2	NIBP/Masimo Oximetria de pulso/Temperatura
53STP-U2	NIBP/Masimo Oximetria de pulso/Temperatura/Impressora
53N00-U2	NIBP/Oximetria de Pulso
53N0P-U2	NIBP/Oximetria de Pulso/Impressora
53NT0-U2	NIBP/Oximetria de Pulso/Temperatura
53NTP-U2	NIBP/Oximetria de Pulso/Temperatura/Impressora
008-0835-01	Suporte móvel com cesto para acessórios
008-0834-01	Suporte de parede com cesto para acessórios
008-0890-00	Suporte de soro IV



Welch Allyn European Customer Services

Navan Business Park, Dublin Road, Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754

www.welchallyn.com

©2005 Welch Allyn. Direitos reservados. SureTemp é uma marca comercial registada da Welch Allyn, Inc. Nellcor e OxiMax são marcas comerciais registadas da Nellcor Puritan Bennett Inc. Masimo é uma marca comercial da Masimo Corporation.

SM2615PT RevD

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™